

Suntest XXL+ 氙灯老化试验箱 安装条件



多谢贵公司向我们订购上述仪器。为使安装过程得以顺利进行在我们工程师到贵厂前，烦请提供以下使用条件，如完成后，请在相应之方格上加上√号。在所有要求完成后，请把此文件传真回本公司当地代表处，我们的客户服务工程师会与阁下联络安排实地安装时间。

1.1.1 环境要求


- 使用环境温度应在 18-25℃湿度应在 50%的空调房内。
- 因仪器在工作时会排出热气,为保障适宜的操作环境,请保持空气畅通(最多 650 立方米/小时),不要在仪器周围堆放杂物。
- 仪器必须远离有毒、腐蚀性物品,远离释放有毒、腐蚀性物品的仪器。
- 仪器安装位置地面具备排水设施(地漏)。

1.1.2 空间要求

- 外围尺寸: 901(宽) 913(深) 17200(高) mm

预留空间: 见下图

重量:290 kg

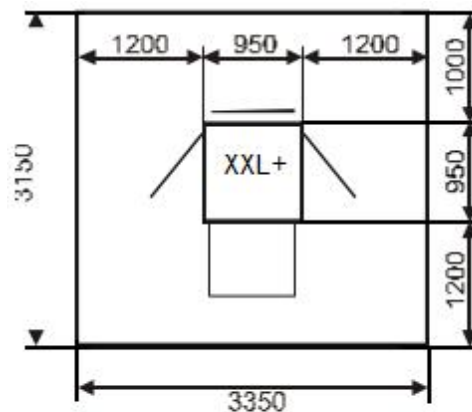

仪器需要的使用空间
(单位: mm)

1.1.3 电源要求

- 电压:400V(±10%, 50Hz, 3P, N, PE), 电流:22A
- 如电压波动超出范围,必需安装稳压设备
- 请配置足够容量的进线电缆、相应电源及接线盒(空气开关式)
- 请保证电源容量及进线电缆的负载能力,仪器功耗 12.1KVA

1.1.4 水源要求

- 仪器要使用纯水,以空气加湿及供应洒水系统,要求之规格如下

- 电导率要求: < 5us/cm;
- pH 值要求: 6~8;
- 颗粒度要求: <1ppm;
- 最大耗水量: 4.5L/min

供水软管管径: 内径 14mm。

1.1.5 排水要求

- 在仪器操作过程中有废水排出, 客户必须提供排水口(地漏形式)以便把废水排走。
 - 水管接口: 内径 3/8" (10mm)

1.1.8 通风要求

- 请为仪器准备排风管。排风管要求使用柔性金属管, 且热阻性能好的材料, 因为排放空气的温度会达到 120℃; 仪器排风口外圆直径为 100mm;
- 排风输送管长度不能超过 3m, 包括两个 90 度弯头。
- 仪器顶部有三个排风口, 必须分别安装排放管道或使用排风罩集中后排风。

1.1.9 其它要求

- 上述之仪器体积, 请保证有足够大的通道、移动设备及起重设备让其从卸货区到达安装位置。
- 如安装位置在二楼或以上楼层, 请考虑升降机能否容纳仪器。
- 仪器安装位置地面必须水平。
- 请贵公司为仪器安装过程配备相应人员, 如电工、水管工、仪器安装就位搬运人员等等。

如贵公司 对上述内容有任何疑问, 欢迎致电我们服务工程师:

客户签处

日期